

Mobilo FS

Hydraulic Functional Stretcher



Stretcher Series



Areas of application

Kullanım alanları



Always Ready for Action

The Mobilo FS Stretcher stands by at the emergency exit — engineered for instant response when every second counts. With smooth mobility, ergonomic design, and robust construction, it ensures rapid, safe, and effortless patient transfer. Mobilo FS delivers reliability and performance when it matters most.

Mobilo FS Sedye, acil çıkışta hazır bekler — her saniyenin önemli olduğu durumlarda anında müdahale için tasarlanmıştır. Pürüzsüz hareket kabiliyeti, ergonomik tasarımı ve sağlam yapısı ile hızlı, güvenli ve zahmetsiz hasta transferi sağlar. Mobilo FS, en önemli anlarda güvenilirlik ve performans sunar.



Ready for Precision Imaging

The Mobilo FS Stretcher is fully compatible with C-Arm X-Ray systems, enabling seamless imaging without patient transfer. Its radiolucent platform and stable structure ensure clear, accurate results while maintaining patient comfort. Mobilo FS — designed for effortless mobility and diagnostic precision.

Mobilo FS Sedye, C-Arm X-Ray sistemleriyle tam uyumludur ve hasta transferi gerekmeden kesintisiz görüntüleme sağlar. Radyo-saydam platformu ve sağlam yapısı, hasta konforunu korurken net ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Mobilo FS — zahmetsiz hareket kabiliyeti ve tanı hassasiyeti için tasarlanmıştır.



Areas of application

Kullanım alanları



Swift Moves, Total Control

Engineered for speed and precision, the Mobilo FS Stretcher glides effortlessly through hospital corridors.

Its 5th castor system ensures exceptional maneuverability, allowing smooth turns and easy navigation even in tight spaces.

Mobilo FS – move faster, handle smarter, care better.

Hız ve hassasiyet için tasarlanan Mobilo FS Sedye, hastane koridorlarında zahmetsizce kayar.

5. tekerlek sistemi olağanüstü manevra kabiliyeti sağlar, dar alanlarda bile yumuşak dönüşler ve kolay hareket imkanı sunar.

Mobilo FS — daha hızlı hareket edin, daha akıllı kullanın, daha iyi bakım sağlayın.



Surgical Precision, Seamless Care

The Mobilo FS Stretcher is designed to support patients safely and comfortably before, during, and after surgical procedures.

Its stable structure, radiolucent surface, and easy positioning system make it ideal for operating environments requiring accuracy and speed.

Mobilo FS – where mobility meets surgical performance.

Mobilo FS Sedye, cerrahi işlemler öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaları güvenli ve rahat bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

Kararlı yapısı, radyo-saydam yüzeyi ve kolay konumlandırma sistemi, hassasiyet ve hız gerektiren ameliyat ortamları için idealdir.

Mobilo FS — hareket kabiliyeti ile cerrahi performansın bulunduğu nokta.



Mobilo FS functions

Mobilo FS işlevleri



90° Backrest Movement

90° Sirt Hareketi



60-90 cm Height Movement

60-90 cm Yükseklik Hareketi



-15° Reverse Trendelenburg

-15° Ters Trendelenburg



15° Trendelenburg

15° Trendelenburg

Maximum Range, Minimum Effort

The Mobilo FS Stretcher offers an exceptional height adjustment system, ensuring smooth transitions from low to high positions with ease. Its minimum lowering height provides effortless patient access and enhances nurse ergonomics during transfers.

Mobilo FS — precision-engineered for comfort, safety, and control.

Mobilo FS Sedye, olağanüstü bir yükseklik ayar sistemi sunarak düşük pozisyonlardan yüksek pozisyonlara kolaylıkla ve sorunsuz geçiş sağlar. Minimum alçaltma yüksekliği, hastaya zahmetsiz erişim sağlar ve transferler sırasında hemşirelerin ergonomisini iyileştirir. Mobilo FS — konfor, güvenlik ve kontrol için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.

Precision Positioning, Enhanced Care

With Trendelenburg and Reverse Trendelenburg functions, the Mobilo FS Stretcher adapts instantly to critical patient positioning needs. These advanced tilt angles improve circulation, support emergency procedures, and enhance overall patient comfort. Mobilo FS — total control for every clinical situation.

Trendelenburg ve Ters Trendelenburg işlevleri ile Mobilo FS Sedye, kritik hasta pozisyonlama ihtiyaçlarına anında uyum sağlar. Bu gelişmiş eğim açıları, dolaşımı iyileştirir, acil durum prosedürlerini destekler ve genel hasta konforunu artırır. Mobilo FS — her klinik durum için tam kontrol.



Mobilo FS Details

Mobilo FS Detaylar



Double Shock Absorber on Back

Sırtta Çift Amortisör



HPL Lying Surface

HPL Yatma Yüzeyi




Oxygen Cylinder Holder

Oksijen Tüpü Tutucu



Central Locking Pedal

Merkezi Kilitleme Pedalı

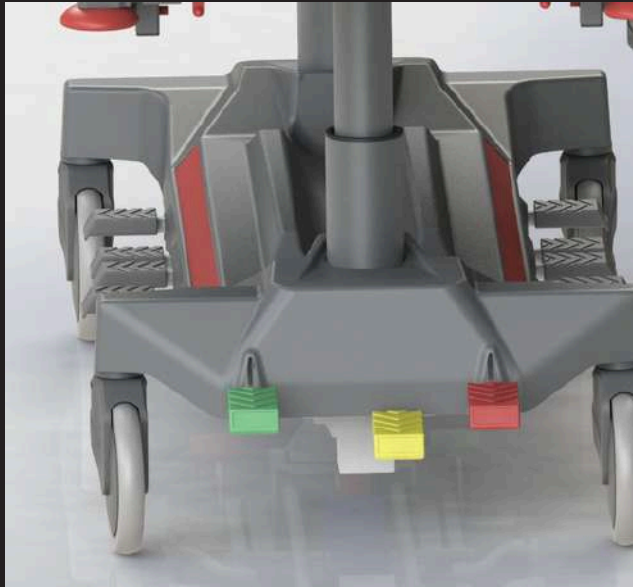

Emergency Shock Pedal

Acil Durum Şok Pedalı



X-Ray Cassette Holder

X-Ray Kaset Tutucu



Foldable Push Bar

Katlanabilir İtme Çubuğu



5th Castor

5th Teker



General Specifications

Genel Özellikler

- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal frame
- 4-piece lying surface made of compact material
- Side rails that can be easily opened and closed
- Protective bumpers on all four corners
- Adjustable folding IV pole
- Plastic-coated foldable push bars
- 360° swivel wheels with central brake system (200 mm)
- 5th wheel (allows easy movement in the desired direction on the stretcher)
- Hydraulic height, Trendelenburg, and reverse Trendelenburg adjustment with foot pedals
- Gas-filled shock absorber-controlled backrest adjustment
- Knee movement adjustment with a step mechanism (Optional)
- ABS plastic-coated lower frame
- Oxygen cylinder storage compartment
- 28 density mattress
- X-ray cassette holder
- Emergency shock position

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemedan imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
- Dört köşesinde koruyucu tamponlar
- Ayarlanabilen katlanır serum askısı
- Plastik kaplı katlanabilen itme barları
- 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (200 mm)
- 5.Teker (Sedyede istenilen yönde hareket kolaylığı sağlar)
- Ayak pedalları ile hidrolik kontrollü yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı
- Gazlı amartisör kontrollü sırt ayarı
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme (Opsiyonel)
- ABS plastik kaplı alt şase
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- 28 dansite şilte
- X-ray kaset taşıyıcısı
- Acil şok pozisyonu



Dış Ölçüler
External Dimensions
81 x 210 cm



Yatak Ölçüsü
Bed Dimensions
60,5 x 190,8 x 8 cm



Yükseklik (Max)
Height (Max)
90 cm



Yükseklik (Min)
Height (Min)
60 cm



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg
-15°



Trendelenburg
Trendelenburg
15°



Sırt Hareketi
Back Movement
90°



Teker Çapı
Castor Diameter
200 mm



Güvenli Çalışma Yüğü
Safe Working Load
320kg

Clinical Efficiency

Klinik Verimlilik

Enhanced Patient Outcome



Falls Prevention

To prevent patient falls, Mobilo FS offers mobilization support, secure siderails and bed exit feature



Support Patient Recovery

Mobilo FS offers multiple positions to help the patient and the Reactive mattress to redistribute pressure.



Improve Patient Experience

Patients can feel comfortable due to Advanced mattress options that reduces pressure, shear and friction forces.



MOBILO FS

Hydraulic Functional Stretcher



Erpomed Manufacturer of Hospital
Equipment
25 Aralık San. Sit.60212. Cad. No:53
Şehitkamil / Gaziantep / TURKEY

Head Office:

tel: 0(342)2381045

Export Department :

tel : +90 542 285 21 27

export@erpomed.com



These products' characteristics comply with the technical parameters related to it and stated in MDR 2017/745 as amended, which stipulates the technical parameters for healthcare products

